



medi

NEU

medi Rehab one

Effektive Ödemtherapie nach
orthopädischen Eingriffen und
Verletzungen am Bewegungsapparat

medi. ich fühl mich besser.

medi Rehab one

Extraleichte Handhabung – hoher Tragekomfort – bewährte Kompression

Der medi Rehab one ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf, den medi speziell zur Behandlung von posttraumatischen und postoperativen Ödemen entwickelt hat.

Diese können beispielsweise in Folge eines Supinationstraumas am Sprunggelenk, nach Ligament-Verletzungen am Knie oder auch in der Rehabilitationsphase nach endoprothetischen Eingriffen auftreten.

Der medi Rehab one vereint bewährte medizinische Kompression mit einer neuen, patentierten Stricktechnologie und cleveren Details.

Leichtes Anziehen – sicherer Sitz

Die innovative Micro-Plüsch-Technologie sorgt dafür, dass der medizinische Kompressionsstrumpf beim Anziehen besonders leicht über die Haut gleitet. Die Handhabung kann durch diese neue Technologie für schmerz sensible Patienten erleichtert werden. Gleichzeitig unterstützt die Micro-Plüsch-Technologie den rutschsicheren Sitz am Bein – auch in der Reha oder beim Sport. Sensitive Haftbänder und Bündchen geben zusätzlichen Halt.



Der medi Rehab one ist ein medizinischer Kompressionsstrumpf der CCL 1. Er hat einen definierten graduierenden Druckverlauf von distal nach proximal. Durch Druck von außen auf das Gewebe werden bestehende Ödeme reduziert und Ödembildung verhindert.

Richtige Positionierung

Der medi Rehab one überzeugt mit weiteren Merkmalen, beispielsweise 3D-Längsrippen und einer Positionierungshilfe am Knie. Diese Details erleichtern auch ungeübten Patienten das korrekte Anlegen des Strumpfes und sorgen für mehr Sicherheit in der täglichen Handhabung.

Hoher Tragekomfort

Die Micro-Plüsch-Technologie ist besonders weich und angenehm auf der Haut. Der Strumpf wurde mit speziellen Funktionszonen ausgestattet, die für ein Plus an Tragekomfort sorgen. Extradünn und atmungsaktiv im sensiblen Knie- und Oberschenkel-Bereich, besonders weich und mit thermo-regulierendem Merino-Plüsch im Fußbereich.


Der medi Rehab one überzeugt mit vielen Details und setzt neue Maßstäbe in der posttraumatischen und postoperativen Kompressionstherapie zur Ödemreduktion und -vermeidung.



Bewährtes Mikronoppen- Haftband sensitiv für zusätzlichen Halt und angenehmen Tragekomfort auf der Haut.



Dünn und besonders atmungsaktiv am Oberschenkel und sensiblen Beugebereich für mehr Tragekomfort.

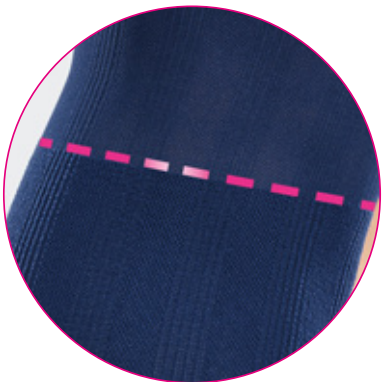

Positionierungshilfe für leichte und sichere Handhabung im Alltag.



Neue, patentierte Stricktechnologie mit Micro-Plüsch:

- Leichtes Anziehen
- Sicherer Sitz
- Hoher Tragekomfort

Zusätzlich: Merino-Plüsch im Mittel- und Vorfuß für mehr Tragekomfort und Thermo-regulierung

Bewährte medizinische Kompression, KKL I.



3D-Längsrippen unterstützen das korrekte Anlegen und geben Sicherheit bei der Handhabung.



Vorgeformte Ferse für eine leichtere Positionierung und einen sicheren Sitz.



Breites Kniestrumpf-Bündchen für zusätzlichen Halt.



Größenindividueller Vorfuß für verbesserte Passform.



Alle Informationen auf einen Blick

medi Rehab one

Der medi Rehab one ist ein rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf. Das Produkt ist ausschließlich zur kompressiven Versorgung der unteren Extremitäten bestimmt und nur für den Gebrauch bei intakter Haut oder sachgemäßer Wundversorgung einzusetzen.

Haupt-Indikationen

- Posttraumatisches Ödem
- Postoperatives Ödem

Kontraindikationen

- Fortgeschrittene periphere arterielle Verschlusskrankheit (wenn einer dieser Parameter zutrifft ABPI < 0,5, Knöchelarteriendruck < 60 mmHg, Zehendruck < 30 mmHg oder TcPO₂ < 20 mmHg Fußrücken)
- Dekompensierte Herzinsuffizienz (NYHA III + IV)
- Septische Phlebitis
- Phlegmasia coerulea dolens

Hilfsmittelnummer

Wadenstrumpf (AD): 17.06.01.0118
Schenkelstrumpf (AG): 17.06.03.0103

Warum gerade medi Rehab one?

- Wadenstrumpf (AD): Micro-Plüsch für leichtes Anziehen
- Schenkelstrumpf (AG): Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

Rezeptbeispiel

Krankenhaus bzw. Kostenträger: Applikations-Nummer: I 18

Name, Vorname des Versicherten: Geburtsdatum: 17.06.01.0118

Kassen-Nr.: Versicherten-Nr.: Status:

Vertrag-Nr.: Vlt. gültig bis: Datum:

Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)

Diagnose: posttraumatisches Ödem
1 Paar medizinische Kompressionsstrümpfe medi Rehab one
CCL1
Wadenstrumpf A-D, geschlossene Fußspitze

Verfärgartabempel: Micro-Plüsch für leichtes Anziehen

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag: Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer:

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2003)

Rezeptbeispiel

Krankenhaus bzw. Kostenträger: Applikations-Nummer: I 18

Name, Vorname des Versicherten: Geburtsdatum: 17.06.03.0103

Kassen-Nr.: Versicherten-Nr.: Status:

Vertrag-Nr.: Vlt. gültig bis: Datum:

Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)

Diagnose: postoperatives Ödem
1 Paar medizinische Kompressionsstrümpfe medi Rehab one
CCL1
Schenkelstrumpf A-G, mit Hafrtrand
offene Fußspitze


Verfärgartabempel: Positionierungshilfe am Knie für leichte und korrekte Handhabung

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!
Unfalltag: Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer:

Unterschrift des Arztes
Muster 16 (4.2003)

So nehmen Sie richtig Maß

ℓ = Längen-
maße c = Umfang-
maße

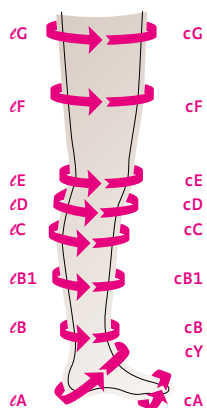

	Umfangmaße in cm				
	II	III	IV	V	VI
HB normal	45–52	49–56	53–60	56–64	60–68
HB weit	53–62	57–67	61–72	65–77	69–81
cG	45–62	49–67	53–72	56–77	60–81
cF	41–56	44–60	47–65	50–69	53–73
cE	33–40	35–43	37–45	39–48	41–51
cD	29–36	32–39	34–42	36–45	38–48
cC	30–37	33–40	35–43	37–46	39–49
cB1	24–29	26–32	29–35	31–37	33–39
cB	20–22	22–24	24–26	26–28	28–30
cY	28–33	29–35	31–37	32–38	33–40
cA	19–24	21–26	23–29	25–32	27–34

Längenmaß in cm	Art.-Nr.	Version
Wadenstrumpf (AD)		
39–44	RA40412–6*	normal
34–38	RA47412–6*	kurz
Schenkelstrumpf (AG)		
72–83	RA61402–6*	normal NoB
	RA65402–6*	normal NoB-W
62–71	RA51402–6*	kurz NoB
	RA55402–6*	kurz NoB-W

* Wählen Sie die Größe an der letzten Stelle der Artikelnummer von 2 bis 6.

Headquarters
medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
Germany
T +49 921 912-333
F +49 921 912-55
medi@medi.de
www.medi.de



0030121/02.2020